


Chirurgie mini-invasive de l'avant-pied
Quelle fraise choisir ?

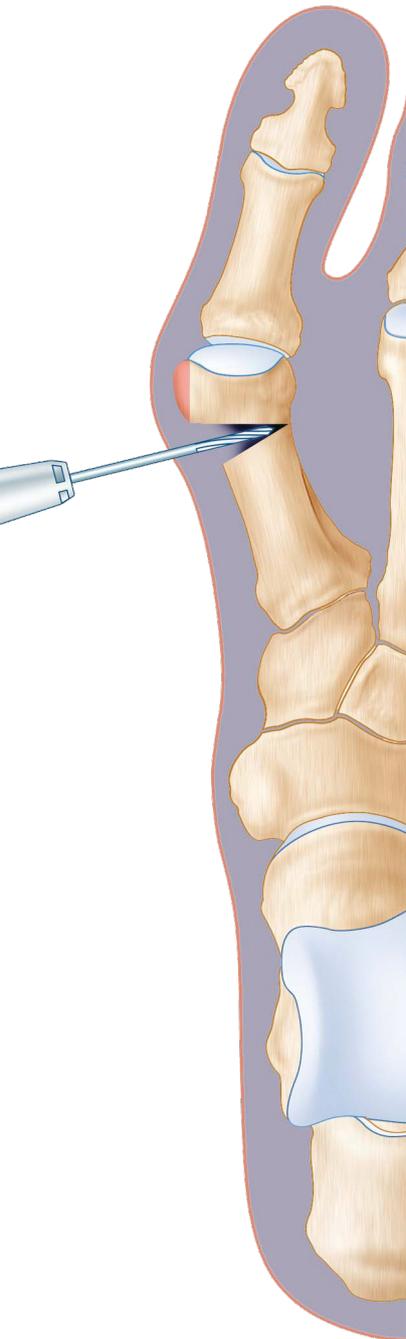

- Shannon courte 2,0 x 8 mm - réf. 256 019 
- Shannon droite 2,0 x 12 mm - réf. 256 018 
- Shannon longue 2,0 x 12 mm - réf. 256 020 
- Wedge 3,1 x 13 mm - réf. 256 016 
- Chevron percutanée 2,5 x 14 mm - réf. 258 157 
- Chevron percutanée 2 x 20 mm - réf. 264 425 
- Chevron percutanée 3,0 x 20 mm - réf. 258 156 
- Wedge extra 4,1 x 13 mm - réf. 256 017 

QUELLE FRAISE CHOISIR ?

Quelle fraise MIS dois-je choisir ?

Pour un 1^{er} rayon classique par traitement percutané, avec une approche proximale ?

1. Résection de la tête de M1

1 Wedge extra 4.1 (réf. 256 017) est utilisée pour égaliser et désépaissir le volume de la tête de M1.

2. Ostéotomie proximale de M1 + Ostéotomie de P1

- 1 Shannon droite** (réf. 256 018)si la correction est < 10°,
- ou **1 Shannon longue** (réf. 256 020)si la correction est d'environ 10°,
- ou **1 Wedge 3.1** (réf. 256 016)si la correction est entre 10 et 20°,
- ou **1 Wedge extra 4.1** (réf. 256 017)si la correction est > 20°.

Pour un 1^{er} rayon classique par traitement percutané, avec une approche basale ?

1. Résection de la tête de M1

1 Wedge extra 4.1 (réf. 256 017) est utilisée pour égaliser et désépaissir le volume de la tête de M1.

2. Ostéotomie basale de M1 + Ostéotomie de P1

- 1 Chevron percutanée de 3mm** (réf. 258 156)si effet accourcissant souhaité
- 1 Chevron percutanée de 2.5mm** (réf. 258 157)sans effet accourcissant marqué

Pour un Hallux Rigidus du 1^{er} rayon ?

1 Wedge extra 4.1 x 13mm (réf. 256 017)

Pour un chevron percutanée du 1^{er} rayon ?

1. Résection de la tête de M1

1 Wedge extra 4.1 (réf. 256 017) est utilisée pour égaliser et désépaissir le volume de la tête de M1.

2. Ostéotomie chevron de M1

- 1 Chevron percutanée de 3mm** (réf. 258 156)si effet accourcissant souhaité
- 1 Chevron percutanée de 2.5mm** (réf. 258 157)sans effet accourcissant marqué
- 1 Chevron percutanée de 2mm** (réf. 264 425)
- + Vis 3A (auto compressive) ou Vis percutanée (pas auto compressive) pour la fixation

3. Ostéotomie de P1

- 1 Shannon droite** (réf. 256 018)si la correction est < 10°,
- ou **1 Shannon longue** (réf. 256 020)si la correction est d'environ 10°,
- + Vis 3A (auto compressive) ou Vis percutanée (pas auto compressive) pour la fixation

Pour les rayons latéraux ?

Ostéotomies mini invasive distales des métatarsiens (DMMO) sur R2, R3, R4 :

1 Shannon longue (réf. 256 020)

Tous gestes osseux sur petits orteils : griffes d'orteils, crosse, clinodactylie, accourcissement, œil de Perdrix

1 Shannon courte 8mm (réf. 256 019) si R2 ou R3

QUELLE FRAISE CHOISIR ?